

028718

17.03.2025

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale di POTENZA

Via Torraca, 2

85100 POTENZA (PZ)

U.O.C. Attività Tecniche

Preg.ma Arch. Franca CICALÈ

Prot. 04.25/POL/MV

Roma, 04 Marzo 2025

Oggetto: Aggiornamento del sistema immagine ed integrazione dello stesso sul Telecomandato Rx Helios DRF in dotazione alla radiologia del P.O. di Maratea (PZ).

A seguito di fermo macchina a carico della diagnostica telecomandata Rx in oggetto, dopo primo accesso della scrivente volto alla risoluzione del problema, abbiamo inoltrato richiesta di intervento alla ditta Assing, azienda costruttrice del sistema di che trattasi.

Come si evince dal rapporto di lavoro allegato, l'Assing ha riscontrato il mancato collegamento tra il detettore, il suo controller (PU) e il sistema immagine (computer PID); nonostante vari tentativi di ripristino dell'intero sistema, la diagnostica evidenziava il permanere del messaggio di errore "Collegamento fallito con ACPP Box".

Per risolvere il suddetto problema e ripristinare la funzionalità della diagnostica, si rende necessario l'aggiornamento del sistema Helios DRF, con particolare riferimento all'intero sistema immagine, al fine di superare l'obsolescenza del vecchio ambiente Windows 7 e garantendo così la compatibilità con le tecnologie attuali e future. L'integrazione simultanea del nuovo detettore, del sistema Eracle, del generatore aggiornato, del controller del telecomandato e dei monitor di nuova generazione consentirà di:

- Ripristinare le funzionalità operative dell'apparecchiatura.
- Migliorare le prestazioni in termini di qualità delle immagini e affidabilità del sistema.
- Prolungare il ciclo di vita dell'impianto, assicurando elevati standard di sicurezza e qualità in ambito clinico

Vi rimettiamo, pertanto, una sintetica descrizione degli step e degli interventi previsti da casa madre, necessari per implementare l'aggiornamento tecnologico del Telecomandato Helios DRF, installato nel reparto di Radiologia presso il P.O. di Maratea (PZ).

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERO AGGIORNAMENTO OFFERTO

1. Sostituzione dell'attuale detettore (flat panel) con il nuovo modello Pixium 4343 FL4 in quanto non più disponibile la (PU) di quello attuale
2. Per quanto riguarda il sistema immagine si prevede la transizione dall'attuale sistema Inside (PID) al nuovo sistema Eracle, compatibile esclusivamente con Windows 11, con relativa installazione e configurazione del nuovo software su nuovo hardware.
3. Aggiornamento dell'interfaccia di comunicazione del generatore per garantire la piena integrazione con il nuovo sistema immagine e il sistema Helios DRF.
4. Aggiornamento del controller del telecomandato per garantire la compatibilità con il nuovo sistema immagine e il generatore aggiornato.
5. Sostituzione degli attuali monitor da 19" con unità da 24"/27", incluso il touchscreen sul monitor presente in sala operatore, per adeguarsi alla nuova risoluzione video richiesta dal sistema Eracle.


Per maggiori dettagli e specifiche, si allega la relazione tecnica ed economica pervenutaci da Assing.

Trattandosi di aggiornamento tecnologico e di attività di manutenzione evolutiva, tali oneri non sono a carico della scrivente, così come contemplato dal Capitolato Speciale di Appalto

Restando a disposizione per ogni eventualità, con l'occasione rinnoviamo i nostri più cordiali saluti.

Polygon S.p.A

Ing. Massimiliano Vittozzi

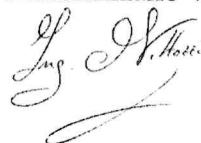

Sede legale: Via Laurentina, 456/455 - 00142 Roma (RM) - Tel. +39.06544081 - Fax +39.0654408214 - Partita IVA e C.F. n° 05915071002
R.E.A. n° 998707 Cap. Soc. € 6.480.000,00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39.02928580 - Fax +39.0292858002
www.polygon.eu - info: info@polygon.eu

UNI EN ISO 9001
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo
UNI CEI EN ISO 13485 UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 37001 SA 8000

UNI EN ISO 27001
UNI PDR 125

data. 25/02/2025
tck. 09892
int. 09350 . AP

prot. 25010AP-999

[C07424][CAT-705] - HELIOS DRF / MG

Cliente **C08309**
Commessa **CAT-705**
Art.Assistenza **A002645**
n°Contratto -
Serial Number **H0050**
Utilizzatore -

ASP POTENZA P.O. DI MARATEA
HELIOS DRF
HELIOS DRF
-
-
ANTONINO IELPO POLYGON

Descrizione Ticket

DIAGNOSI DEL GUASTO

Descrizione Intervento

DIAGNOSI DEL GUASTO

note

Descrizione Attività

ESEGUITA DIAGNOSI DEL GUASTO.
DOPO VARI TENTATIVI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA IMMAGINI CON ESITO
NEGATIVO,
SI RISCONTRANO PROBLEMI DI COLLEGAMENTO TRA LA PU,IL DETETTORE
E IL PID CON MESSAGGIO DI, "COLLEGAMENTO FALLITO CON ACPP BOX".

SEGUIRA' PREVENTIVO DETTAGLIATO PER IL RIPRISTINO.

manodopera

tcn	data interv	h/lav	h/viag	km	da	in	out	desc. breve
AP	25-feb-25	0	4,5	0				
AP	25-feb-25	2,5	0	0				

manutenzione asset

parti di ricambio per gli asset

parti di ricambio fornite

materiali di consumo forniti

tecnici intervenuti

(AP) - Procida Alessandro

Il documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 22 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo.

redattore del report / firma

Procida Alessandro



cliente / firma

Polygon S.p.A.
Il Responsabile di Commessa
Antonino Ielpo

